



Razon social: CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO

Ciudad: BOGOTÁ

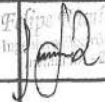
AAR 2026

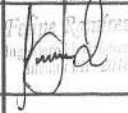
[illegible]

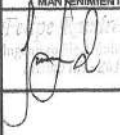
PROXIMA REVISION	ENERO 19 DE 2027
------------------	------------------

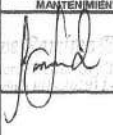
Felipe Ramírez Espinel
Ingeniero Electrónico y Biomédico
Teléfono RH - 261811 - 590

FELIPE RAMIREZ ESPINEL
ING. ELECTRONICO Y BIOMEDICO
C.C 1015445637
INSC. INVIMA RH-201811-590
TEL. 251237-076745 CND

		ARG VISIÓN					
		HOJA DE VIDA EQUIPOS OPTOMETRIA					
EQUIPO: PROBADOR FOTOCROMATICO		MARCA: ANDRU VISIÓN		MODELO: NO REGISTRA		SERIE: 1704141002	
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: ARG VISIÓN				REGISTRO INVIMA: NO REGISTRA			
UBICACIÓN DEL EQUIPO: ÓPTICA				EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL:	X	PESO: 1 Kg
CALIBRACION: NO							
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
MEDICO		ALTO		ELECTRICO		ELECTRO-MECANICO	
USO	BASICO	USO	MEDIO	CLASE	ELECTRONICO	ÓPTICO	
	APOYO		BAJO		MECANICO		
ACCESORIOS: N.A							
V. OPERACION: 110 V		POTENCIA CONSUMO: 10 W		FRECUENCIA		60 HZ	
CORRIENTE OPERACIÓN: 1 A		TEMPERATURA USO: N.A		TEMPERATURA ALMACENAMIENTO: N.A			
MANTENIMIENTO		PREVENTIVO		CORRECTIVO		ANUAL	
PROPIETARIO							
NIT Ó CEDULA		NOMBRE PROPIETARIO		NOMBRE ENTIDAD		DIRECCIÓN	
40.179.945-1				CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO		AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR	
FECHA	OBSERVACIONES					FIRMA RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PROXIMA FECHA DE REVISIÓN
19/01/2026	Se verifica el estado en que se encuentran sus bombillas internas, estos funcionando perfectamente, se toma medidas de voltaje para verificar que trabaja en dichos parametros establecidos por el fabricante. Equipo realiza su debida funcion.						19/01/2027

		ARG VISIÓN					
		HOJA DE VIDA EQUIPOS OPTOMETRIA					
EQUIPO: LENSOMETRO MANUAL		MARCA: TOPCON		MODELO: NO REGISTRA		SERIE: 254996	
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: ARG VISIÓN				REGISTRO INVIMA: NO REGISTRA			
UBICACIÓN DEL EQUIPO: ÓPTICA				EQUIPO FIJO:		EQUIPO MOVIL: ☒	
				PESO: 5 Kg		CALIBRACION: SI	
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
MEDICO		ALTO		ELECTRICO		ELECTRO-MECANICO	
USO	BASICO	USO	MEDIO	CLASE	ELECTRONICO	ÓPTICO	
APOYO		BAJO		MECANICO		☒	
ACCESORIOS:		N.A.				CLASIFICACION AL RIESGO	
V. OPERACION:		1.5 V DC		POTENCIA CONSUMO:		30 W	
CORRIENTE OPERACIÓN:		0.2 A		TEMPERATURA USO:		N.A.	
MANTENIMIENTO		PREVENTIVO		☒		CORRECTIVO	
						PERIODICIDAD	
						ANUAL	
PROPIETARIO							
NIT Ó CEDULA		NOMBRE PROPIETARIO		NOMBRE ENTIDAD		DIRECCIÓN	
40.178.945-1				CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO		AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR	
FECHA	OBSERVACIONES					FIRMA RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PROXIMA FECHA DE REVISIÓN
19/01/2026	Se verifica el estado estructural del lensometro manual, se hace limpieza del ocular, utilizando un paño de microfibras y un copito, para garantizar una visión clara y precisa. Se ha verificado el correcto funcionamiento de los tambores de ajuste de potencia esférica, cilíndrica y de eje, asegurándose de que giren suavemente sin resistencia. El soporte de lente y el brazo de apoyo han sido revisados para confirmar que sujetan las lentes firmemente y se deslizan sin dificultad.					 Juan Carlos Restrepo 19/01/2027	19/01/2027

		ARG VISIÓN					
		HOJA DE VIDA EQUIPOS OPTOMETRIA					
EQUIPO: UVEOMETRO		MARCA: NO REGISTRA		MODELO: NO REGISTRA		SERIE: 17061310628	
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: ARG VISIÓN				REGISTRO INVIMA: NO REGISTRA			
UBICACIÓN DEL EQUIPO: ÓPTICA				EQUIPO FIJO:		EQUIPO MOVIL: ☒	
				PESO: 1 Kg		CALIBRACION: SI	
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
MEDICO		ALTO		ELECTRICO		ELECTRO-MECANICO	
USO	BASICO	USO	MEDIO ☒	CLASE	ELECTRONICO	ÓPTICO	☒
APOYO		BAJO		MECANICO			
ACCESORIOS:		N.A.				CLASIFICACION AL RIESGO	
V. OPERACION:		110 V		POTENCIA CONSUMO:		10 W	
CORRIENTE OPERACIÓN:		1 A		TEMPERATURA USO:		N.A.	
MANTENIMIENTO		PREVENTIVO		☒		CORRECTIVO	
						PERIODICIDAD	
						ANUAL	
PROPIETARIO							
NIT Ó CEDULA		NOMBRE PROPIETARIO		NOMBRE ENTIDAD		DIRECCIÓN	
40.179.945-1				CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO		AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR	
FECHA	OBSERVACIONES					FIRMA RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PROXIMA FECHA DE REVISIÓN
19/01/2026	Se revisa el voltaje de entrada y de salida esten de acuerdo a sus especificaciones tecnicas. los sensores de uvometro funcionan correctamente, el interruptor de encendido en buenas condiciones. Se revisa el funcionamiento del probador fotocromatico integrado y este funciona excelentemente. Se realiza calibracion, este verificado de calibrado se podra encontrar en su respectivo certificado.						19/01/2027

		ARG VISIÓN						
		HOJA DE VIDA EQUIPOS OPTOMETRIA				CIUDAD: BOGOTÁ		
EQUIPO: ESFEROMETRO		MARCA: NO REGISTRA		MODELO: 3T		SERIE: NO REGISTRA		
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: ARG VISIÓN				REGISTRO INVIMA: NO REGISTRA				
UBICACIÓN DEL EQUIPO: ÓPTICA				EQUIPO FIJO:		EQUIPO MOVIL: ☒ PESO: 0.5 Kg		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
MEDICO		ALTO		ELECTRICO		ELECTRO-MECANICO		
USO	BASICO	USO	MEDIO ☒	CLASE	ELECTRONICO	ÓPTICO	☒	
APOYO ☒		BAJO		MECANICO		CLASIFICACION AL RIESGO		
ACCESORIOS: N.A.						NO APLICA ☒		
V. OPERACION: N.A.		POTENCIA CONSUMO: N.A.		FRECUENCIA: N.A.		I		
CORRIENTE OPERACIÓN: N.A.		TEMPERATURA USO: N.A.		TEMPERATURA ALMACENAMIENTO: N.A.		IIA		
MANTENIMIENTO		PREVENTIVO ☒		CORRECTIVO		IIB		
						III		
PROPIETARIO								
NIT Ó CEDULA		NOMBRE PROPIETARIO		NOMBRE ENTIDAD		DIRECCIÓN		
40.179.945-1				CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO		AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR		
FECHA	OBSERVACIONES					FIRMA RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PRÓXIMA FECHA DE REVISIÓN	
19/01/2026	Se calibra y se revision parte mecanica, se revisa la manecilla, se ajusta impreso. Se realiza calibracion, este verificado de calibrado se podra encontrar en su respectivo certificado.						19/01/2027	



REPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO

NUMERO DE SERVICIO
N.º: 6331

NOMBRE ENTIDAD:
CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO

CC/NIT:
40.179.945-1

CIUDAD: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR

NOMBRE PROPIETARIO:

CELULAR: 302 339 4660

TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO	PREVENTIVO	X	FECHA: 19/01/2026
EQUIPO: Probador fotocromático	MARCA: ANDRU VISIÓN	SERIE: 1704141002		
MODELO: NO REGISTRA	UBICACIÓN: ÓPTICA			

LISTA DE CHEQUEO PARA EL PROBADOR FOTOCROMATICO

Estructura	B		
Botón de encendido	B		
Bombillos	B		
Adaptador	B		
Pruebas de funcionamiento	B		
Limpieza externa	B		
Funcionamiento final	B		

B: Bueno

R: Regular

M: Malo

NT: No tiene

NA: No aplica

Observaciones y recomendaciones:

Se revisa cuidadosamente el voltaje de entrada para garantizar un funcionamiento estable. Se realiza una inspección y ajuste meticuloso del interruptor de encendido, así como los bombillos del probador. Equipo en óptimas condiciones. Próxima fecha de mantenimiento: 19/01/2027.

Quien entrega (Ingeniero de ARG Visión)

Nombre: Felipe Ramírez

CC: 10154454637
Ingeniero Electrónico y Biomédico
Invima RH - 201811 - 590

FELIPE RAMIREZ ESPINEL
C.C 10154454637 de Bogotá
Registro profesional No. CN206-186064
RH 201811-590

Recibido a satisfacción

Nombre:

CC:

Cargo:

Firma:

El servicio técnico y los repuestos serán facturados. **Términos de garantía:** La garantía será invalidada cuando el equipo haya sido manipulado por personal no autorizado por ARG Visión o bien el equipo sea utilizado inadecuadamente y/o expuesto a: Agentes externos, intemperie, instalación deficiente o malos manejos; La estructura del probador fotocromático puede variar según el modelo y la marca específica. Sin embargo, se proporciona una lista general de partes comunes que suelen estar presentes en este equipo.

CEL: (57) 320 307 0042 / 310 585 5399 / Email Felipe.ramirez.ingeniero@outlook.com / Bogotá-Colombia /

		REPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO	NUMERO DE SERVICIO N.º: 6332
NOMBRE ENTIDAD: CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO		CC/NIT: 40.179.945-1	CIUDAD: BOGOTÁ DIRECCIÓN: AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR
NOMBRE PROPIETARIO:		CELULAR: 302 339 4660	

TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO	PREVENTIVO	X	FECHA: 19/01/2026
EQUIPO: UVEOMETRO	MARCA: NO REGISTRA	SERIE: 17061310628		
MODELO: NO REGISTRA	UBICACIÓN: ÓPTICA			

LISTA DE CHEQUEO PARA EL UVEOMETRO

Estructura	B	Funcionamiento final	B
Interruptor de encendido	B		
Display UV	B		
Cable de enchufe	B		
Luz del display UV	B		
Base del lente	B		
Sensor de UV	B		
Pruebas de funcionamiento	B		
Limpieza externa	B		

B: Bueno

R: Regular

M: Malo

NT: No tiene

NA: No aplica

Observaciones y recomendaciones:

Se revisa cuidadosamente el voltaje de entrada para garantizar un funcionamiento estable. Se realiza una inspección y ajuste meticuloso del interruptor de encendido, así como el Display del uv. Equipo en óptimas condiciones. Próxima fecha de mantenimiento: 19/01/2027.

Quien entrega (Ingeniero de ARG Visión)

Nombre: Felipe Ramírez

CC: 10154454637

Felipe Ramírez Espinel
Ingeniero Electrónico y Biomédico
Inyima RH - 201811 - 590

FELIPE RAMIREZ ESPINEL

C.C 10154454637 de Bogotá

Registro profesional No. CN206-186064

RH 201811-590

Recibido a satisfacción

Nombre:

CC:

Cargo:

Firma:

El servicio técnico y los repuestos serán facturados. **Términos de garantía:** La garantía será invalidada cuando el equipo haya sido manipulado por personal no autorizado por **ARG Visión** o bien el equipo sea utilizado inadecuadamente y/o expuesto a: Agentes externos, intemperie, instalación deficiente o malos manejos; La estructura del Uveometro puede variar según el modelo y la marca específica. Sin embargo, se proporciona una lista general de partes comunes que suelen estar presentes en este equipo.

CEL: (57) 320 307 0042 / 310 585 5399 / Email Felipe.ramirez.ingeniero@outlook.com / Bogotá-Colombia /



VERIFICACION DE MEDIDAS

EQUIPO: LENSOMETRO MANUAL

MARCA: TOPCON

MODELO: NO REGISTRA

NUMERO DE SERIE: 254996

CLASIFICACION DE RIESGO: NO APLICA

NOMBRE ENTIDAD: CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO

DIRECCION: AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR (BOGOTÁ)

PERIODICIDAD CALIBRACION: ANUAL

FECHA DE REVISION CALIBRADO DEL EQUIPO: 2026 – ENERO – 19

PROXIMA FECHA DE CALIBRACION: 2027 – ENERO – 19

NUMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS: 3

Los resultados del presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ARG VISION no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.



VERIFICACION DE MEDIDAS

TRAZABILIDAD:

ARG VISION garantiza la trazabilidad de los patrones utilizados en estas mediciones hacia patrones nacionales e internacionales.

METODO:

Comparación directa de las indicaciones del instrumento a calibrar con el patrón, Poder de refracción de un lente (formula) expresado en dioptrías, con valores positivos o negativos. Se consideraron diferencias estadísticas de $p < 0,05$ para la razón-F con un nivel de confianza del 95%.

RANGO DE MEDICION: DIOPTRIAS

DIVISION DE ESCALA: 0.25 D

SITIO DE MEDICION: Consultorio

RESULTADOS DE CALIBRACION:

	1	2	3	DESVIACION ERROR	Valor de referencia	Resultado	
	MEDICION	MEDICION	MEDICION				
DIOP (D)	D	D	D	D	D	D	Verificación
+ 3.00	+ 3.00	+ 3.00	+ 3.00	0,01	3,07	+ 3.00	APROBADO
+ 2.50	+ 2.50	+ 2.50	+ 2.50	0,01	2.51	+ 2.50	APROBADO
0	0	0	0	0,01	0	0	APROBADO
- 2.50	- 2.50	- 2.50	- 2.50	0,01	-2.51	- 2.50	APROBADO
-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	0,01	-3.01	-3.00	APROBADO
- 3.50	- 3.50	- 3.50	- 3.50	0,01	-3.51	- 3.50	APROBADO



VERIFICACION DE MEDIDAS

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION:

La razón-F, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos, puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la medida de cada punto evaluado entre un nivel de metrólogos y otro, con un nivel de confianza del 98%.

PATRONES UTILIZADOS

Certifica ARG Visión No.

OBSERVACIONES:

El usuario es responsable del control de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMA AUTORIZADA


Felipe Ramírez Espinel
Ingeniero Electrónico y Biomédico
Inscripción RH - 201811 - 590

FELIPE RAMIREZ ESPINEL
ING. ELECTRONICO Y BIOMEDICO
REGISTRO PROFESIONAL NO. CN206-186064
RH 201811-590



VERIFICACION DE MEDIDAS

EQUIPO: LENSOMETRO MANUAL

MARCA: TOPCON

MODELO: NO REGISTRA

NUMERO DE SERIE: 254996

CLASIFICACION DE RIESGO: NO APLICA

NOMBRE ENTIDAD: CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO

DIRECCION: AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR (BOGOTÁ)

PERIODICIDAD CALIBRACION: ANUAL

FECHA DE REVISION CALIBRADO DEL EQUIPO: 2026 – ENERO – 19

PROXIMA FECHA DE CALIBRACION: 2027 – ENERO – 19

NUMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS: 3

Los resultados del presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ARG VISION no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.



VERIFICACION DE MEDIDAS

TRAZABILIDAD:

ARG VISION garantiza la trazabilidad de los patrones utilizados en estas mediciones hacia patrones nacionales e internacionales.

METODO:

Comparación directa de las indicaciones del instrumento a calibrar con el patrón, Poder de refracción de un lente (formula) expresado en dioptrías, con valores positivos o negativos. Se consideraron diferencias estadísticas de $p < 0,05$ para la razón-F con un nivel de confianza del 95%.

RANGO DE MEDICION: DIOPTRIAS

DIVISION DE ESCALA: 0.25 D

SITIO DE MEDICION: Consultorio

RESULTADOS DE CALIBRACION:

	1	2	3	DESVIACION ERROR	Valor de referencia	Resultado	
	MEDICION	MEDICION	MEDICION				
DIOP (D)	D	D	D	D	D	D	Verificación
+ 3.00	+ 3.00	+ 3.00	+ 3.00	0,01	3,07	+ 3.00	APROBADO
+ 2.50	+ 2.50	+ 2.50	+ 2.50	0,01	2.51	+ 2.50	APROBADO
0	0	0	0	0,01	0	0	APROBADO
- 2.50	- 2.50	- 2.50	- 2.50	0,01	-2.51	- 2.50	APROBADO
-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	0,01	-3.01	-3.00	APROBADO
- 3.50	- 3.50	- 3.50	- 3.50	0,01	-3.51	- 3.50	APROBADO



VERIFICACION DE MEDIDAS

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION:

La razón-F, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos, puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la medida de cada punto evaluado entre un nivel de metrólogos y otro, con un nivel de confianza del 98%.

PATRONES UTILIZADOS

Certifica ARG Visión No.

OBSERVACIONES:

El usuario es responsable del control de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMA AUTORIZADA

Felipe Ramírez Espinel
Ingeniero Electrónico y Biomédico
Covima RH - 201811 - 590

FELIPE RAMIREZ ESPINEL
ING. ELECTRONICO Y BIOMEDICO
REGISTRO PROFESIONAL NO. CN206-186064
RH 201811-590



VERIFICACION DE MEDIDAS

EQUIPO: ESFEROMETRO

MARCA: NO REGISTRA

MODELO: 3T

NUMERO DE SERIE: NO REGISTRA

CLASIFICACION DE RIESGO: NO APLICA

NOMBRE ENTIDAD: CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO

DIRECCION: AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR (BOGOTÁ)

PERIODICIDAD CALIBRACION: ANUAL

FECHA DE REVISION CALIBRADO DEL EQUIPO: 2026 – ENERO – 19

PROXIMA FECHA DE CALIBRACION: 2027 – ENERO – 19

NUMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS: 3

Los resultados del presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ARG VISION no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.



VERIFICACION DE MEDIDAS

TRAZABILIDAD:

ARG VISION garantiza la trazabilidad de los patrones utilizados en estas mediciones hacia patrones nacionales e internacionales.

METODO:

Comparación directa de las indicaciones del instrumento a calibrar con el patrón.

RANGO DE MEDICION:

BASE

DIVISION DE ESCALA:

1 – 8 B

SITIO DE MEDICION:

Laboratorio

RESULTADOS DE CALIBRACION BASE:

CURVA BASE (-)	CURVA BASE (+)	RESULTADO 1	RESULTADO FINAL	ERROR PROMEDIO
-4.00	+4.00	-4.002 / +4.003	0.002 / 2.1	0.0048
+2.00	+2.00	+2.002 / +4.003	0.002 / 2.1	0.0048
+6.00	+6.00	+6.002 / +4.003	0.002 / 2.1	0.0048

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION:

La incertidumbre encontrada en el proceso de calibración es de ± 0.01 BASE

El valor verdadero este dentro de un rango de valores indicado y la incertidumbre expandida (U_e) es el producto de la suma de las diferentes incertidumbres con un factor de cobertura $K=2$, garantizando un nivel de confianza de aproximadamente 95%.



VERIFICACION DE MEDIDAS

PATRONES UTILIZADOS

BASE -4 / BASE +2/ BASE+6

Certifica ARG Visión No.

OBSERVACIONES:

El usuario es responsable del control de sus instrumentos a intervalos apropiados. Dentro del rango de medida se revisa la verificación de calibrado con patrón de medida encontrado.

FIRMA AUTORIZADA

Felipe Ramírez Espinel
Ingeniero Electrónico y Biomédico
Cédula RH - 201811 - 590

FELIPE RAMÍREZ ESPINEL

ING. ELECTRONICO Y BIOMEDICO

REGISTRO PROFESIONAL NO. CN206-186064

RH 201811-590



CAPACITACIÓN EN EL MANEJO SEGURO DE EQUIPOS

VERSIÓN	01
FECHA DE APROBACIÓN	17/01/2025
PÁGINA	2 de 2

CIUDAD: BOGOTÁ

RAZON SOCIAL: CENTRO ÓPTICO SAN ANTONIO

DIRECCION: AV 1 DE MAYO No. 19C - 09 SUR

FECHA (DD/MM/AA): 19/01/2026

OBJETIVO:

- Capacitar al personal de centro óptico san antonio en el buen uso, manejo y mantenimiento asegurando su correcta operación y solución de problemas comunes, con una evaluación posterior para medir el aprendizaje de los equipos que se encuentran ubicados en la óptica.

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS PARA CAPACITAR:

EQUIPOS PARA CAPACITAR	FRECUENCIA DE USO	METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN
LENSOMETRO MANUAL	Diario	Explicación de los principios de funcionamiento, características y precauciones. Demostración práctica en el uso del equipo en la óptica Material de apoyo como Manuales de los equipos. Resolución de problemas comunes y mantenimiento básico.
UVEOMETRO	Diario	
ESFEROMETRO	Diario	
PROBADOR FOTOCROMATICO	Diario	

- ✓ Propietario de la óptica
- ✓ Firma: Propietario o director científico
- ✓ Responsable del mantenimiento

ORDEN EVALUATIVO:

	TEMA	VERIFICACION (marcar x)
1	Prueba del buen mantenimiento del equipo.	X
2	Capacitación en el uso y mantenimiento.	X
3	Limpieza general del equipo	X
4	Demostración del manejo correcto de los equipos de optometría.	X
5	Levantamiento y firma	X

Quien capacita
Nombre: Ingeniero Felipe Ramírez

CC: 10154454637

Felipe Ramírez Espinel
 Ingeniero Electrónico y Biomédico
 C.C. 10154454637 - 201811 - 590

FELIPE RAMIREZ ESPINEL
C.C 10154454637 de Bogotá
Registro profesional No. CN206-186064
RH 201811-590

Recibió capacitación

Nombre:

CC:

Cargo

Firma: